


Vacuset

Absaugsystem mit Vakuumflasche

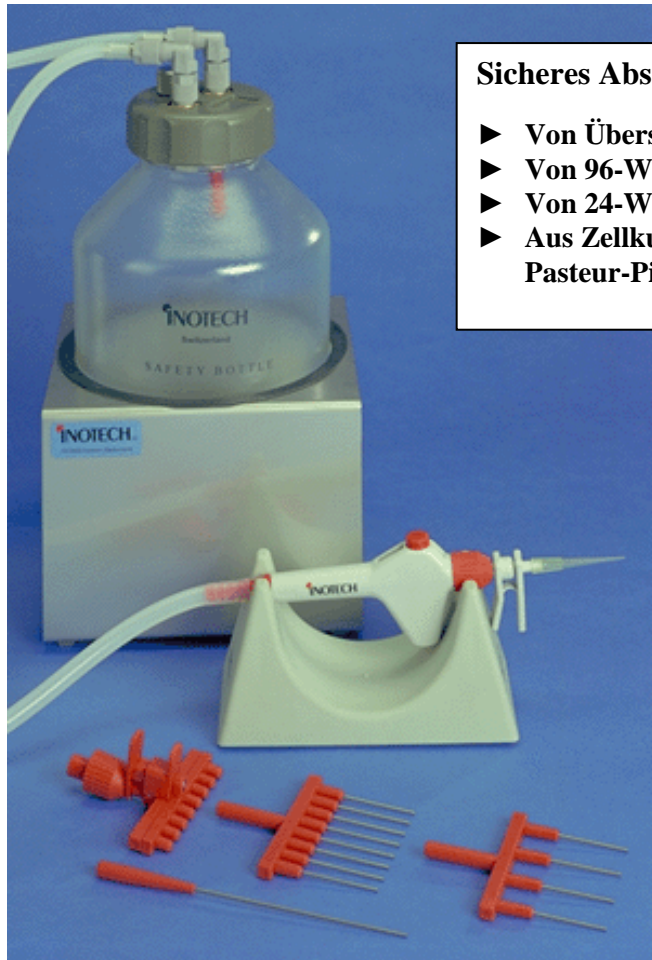

Sicheres Absaugen von Flüssigkeiten - z.B.:

- ▶ Von Überständen in der Zellkultur
- ▶ Von 96-Well-Platten mit dem 8-Kanal-Adapter
- ▶ Von 24-Well-Platten mit dem 4-Kanal-Adapter
- ▶ Aus Zellkultur- oder Zentrifugenröhrchen mit Pasteur-Pipette.

- **Verschiedene Adapter für zahlreiche Anwendungen**
- **Sicherheitsflasche, bruchsicher durch Spezialbeschichtung**
- **Sicherheitsständer für Flasche**

Kat.-No. Beschreibung

IV-500 Vacuset komplett:

- IV-510 - Handgriff, mit Druckknopfsteuerung,
- IV-501 - Ständer für Handgriff
- IV-503 - 8-Kanal-Absaugadapter mit Edelstahlnadeln, 35 mm lang, für 96-Well Platten
- IV-524 - 4-Kanal-Absaugadapter mit Edelstahlnadeln, 35 mm lang, für 24-Well Platten
- IV-502 - 1-Kanal-Absaugadapter mit Edelstahlnadel, 40 mm lang
- IV-504 - 1-Kanal-Kunststoff-Absaugadapter für Pipettenspitzen, ohne Abwurfvorrichtung
- IV-505 - Silikon-Adapter für Pasteur-Pipetten und 2 ml Pipetten
- IV-507 - Silikonschlauchhalter, mit Wandhalter
- IV-506 - Silikonschlauch
- IV-509 - Silikonfett für Dichtungsring
- IV-508 - Schweizer Offiziersmesser

Kat.-No. Beschreibung

IV-400 **Vacuset einfache Version**, mit 1-Kanal-Kunststoff-Absaugadapter für Spitzen:

- IV-510 - Handgriff, mit Druckknopfsteuerung,
- IV-404 - 1-Kanal-Kunststoff-Absaugadapter für Pipettenspitzen, mit Abwurfvorrichtung
- IV-505 - Silikon-Adapter für Pasteur-Pipetten und 2 ml Pipetten
- IV-516 - Sicherung des Silikon-Adapters
- IV-509 - Silikonfett für Dichtungsring

IV-596 **Aspirette 8**, mit 8-Kanal-Kunststoff-Absaugadapter für Spitzen:

- IV-510 - Handgriff, mit Druckknopfsteuerung
- IV-520 - 8-Kanal-Kunststoff-Absaugadapter für Pipettenspitzen, mit Abwurfvorrichtung
- IV-505 - Silikon-Adapter für Pasteur-Pipetten und 2 ml Pipetten
- IV-509 - Silikonfett für Dichtungsring

20-820-18 **Vakuumpumpe**, 22 Liter/Minute, Basisdruck 100mBar

IV-530 **Vacubottle System** (Sicherheitsflasche mit Sicherheitsverschluß und Ständer)
(Die folgenden Artikel sind auch einzeln erhältlich):

- IV-540 - 3-L Flasche - bruchsicher durch Spezialbeschichtung, autoklavierbar
(Minderung der Beschichtung durch wiederholtes Autoklavieren)
- IV-531 - Flaschendeckel mit austauschbarer Dichtung, zwei Schlauchanschlüssen und Entlüftungsschraube
- IV-534 - Easy-Off Edelstahl Schlauchkupplung: schnelles Lösen der Schlauchverbindungen am Deckel, dadurch erleichterter Flaschentransport zur Leerung und Reinigung
- IV-535 - Flaschenständer aus Edelstahl, für die Arbeitsfläche oder Wandmontage, B x T x H = 17,8 x 17,8 x 12,7 cm

20-440-21 **Vakuumpumpenschutz, Box/3 Stück**

OPTIONEN

- IV-521 - Wandhalter
- IV-502 - 1-Kanal-Absaugadapter mit Edelstahlnadel*, 40 mm lang
- IV-522 - 1-Kanal-Absaugadapter mit Edelstahlnadel*, 150 mm lang
- IV-525 - 1-Kanal-Absaugadapter mit Edelstahlnadel*, 280 mm lang
- IV-504 - 1-Kanal-Kunststoff-Absaugadapter für Pipettenspitzen, ohne Abwurfvorrichtung
- IV-404 - 1-Kanal-Kunststoff-Absaugadapter für Pipettenspitzen, mit Abwurfvorrichtung
- IV-524 - 4-Kanal-Absaugadapter mit Edelstahlnadeln*, 35 mm lang, für 24-Well Platten
- IV-503 - 8-Kanal-Absaugadapter mit Edelstahlnadeln*, 35 mm lang, für 96-Well Platten
- IV-520 - 8-Kanal-Kunststoff-Absaugadapter für Pipettenspitzen, mit Abwurfvorrichtung

* Die Edelstahlnadeln können durch Abflammen sterilisiert werden.