


Quickfit® Destille



Spezifikationen:

- Kapazität: **4 Liter / Stunde** pyrogenfreies, einfach destilliertes Wasser.
- Qualität des Destillats entspricht Europäischer Pharmakopöe für Reinstwasser & A.S.T.M. Typ 4.
- Pyrex® Glasboiler und -kühler verhindern eine Kontamination des Destillats durch Metallkomponenten.
- pH-Bereich des Destillats: 5,0 - 6,5
- Leitfähigkeit des Destillats: 3,0 - 5,0 $\mu\text{S}/\text{cm}$
- Zwei unabhängig einstellbare Thermostate mit 3kW chrombeschichteten Heizelementen schützen das Gerät bei fehlendem Wasserzulauf.
- Einfach zu reinigen. Glasware muss nicht auseinandergebaut werden.
- Kann auf dem Labortisch stehen oder an der Wand montiert werden.
- CE-zertifiziert.
- Alle Hauptkomponenten sind auch als Ersatzteile erwerbbar.

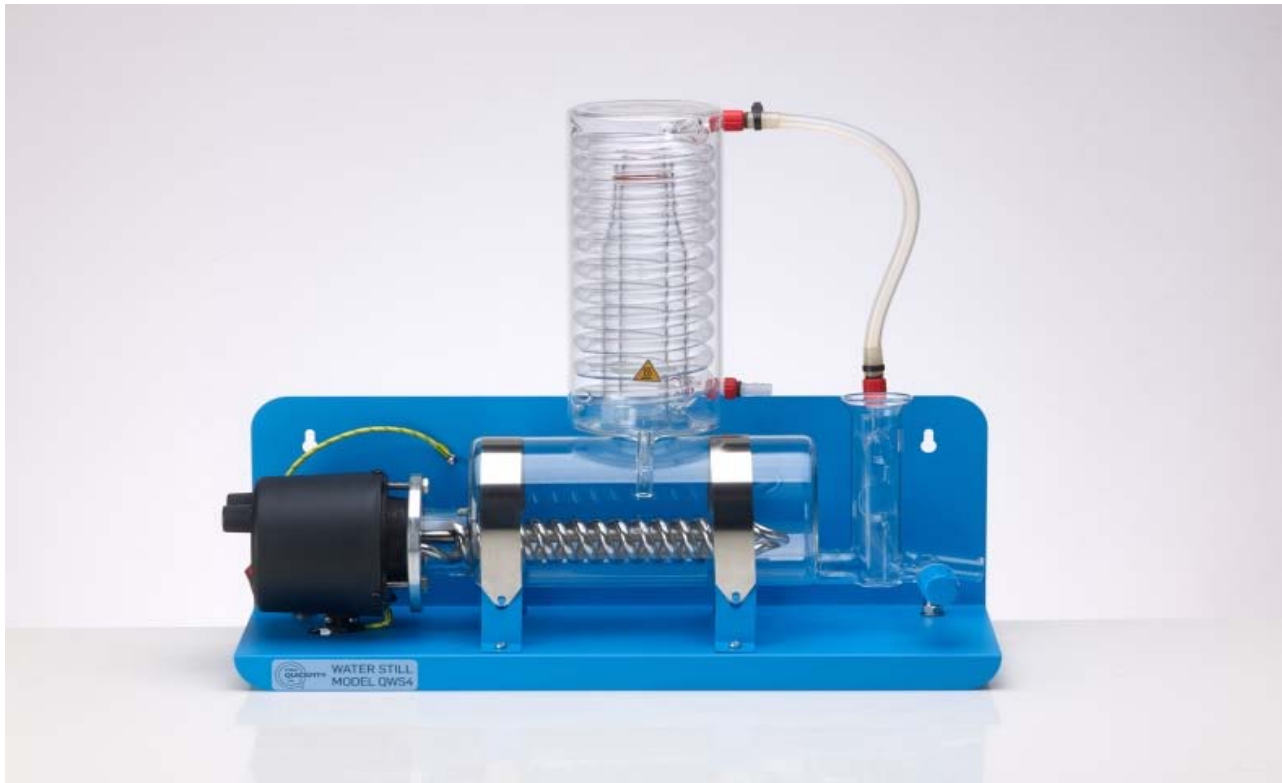

Heizelement und Boiler



Ablauf und Kontrolle Flüssigkeitslevel

Kat. Nr.	Beschreibung	VE
QWS4	Quickfit® Destilliergerät komplett	1
QWSB	Ersatzboiler für QWS4	1
QWSC	Ersatzkühler für QWS4	1
QWSH4	3kW Heizelement 230 V	1
QWS4GK	Dichtungsset für Heizelement	1
QWS4HK	Schlauchset	1
WSR20	20 L Destilliergerät Reservoir Assembly	1
1556/08	500 ml Mediumflasche mit GL56 Verschluss	4

Fragen Sie auch nach unseren separaten SciLabware Broschüren mit Glasprodukten für das Standard- und Chemielabor.